

# Sentóre

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА SONIC EX5



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



## Меры предосторожности

---

При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, всегда следует соблюдать основные меры предосторожности.

Полностью прочтите этот раздел.

### Общие требования безопасности

1. Перед включением прибора убедитесь, что параметры сети соответствует параметрам, указанным на шильдике прибора. Зарядное устройство может использоваться только с адаптером, рассчитанным на постоянный ток 5 В/ $\geq 0,5$  А.
2. Во избежание возгорания, поражения электрическим током и получению травм не используйте адаптер и зарядное устройство в ванной комнате и не погружайте шнур, вилку, адаптер или зарядное устройство в воду или другую жидкость. Не промывайте адаптер и зарядное устройство водой.
3. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не размещайте и не храните электроприборы там, где они могут упасть или попасть в ванну или раковину.
4. Не заряжайте прибор, если на USB-кабеле зарядного устройства, вилке или адаптере имеются видимые повреждения.
5. Никогда не тяните за шнур питания, чтобы обесточить прибор. Удерживая вилку, потяните её из розетки.
6. Если зарядное устройство упало в воду, не тянитесь за ним, отключите питание, а затем извлеките его из воды.
7. Не разбирайте и не видоизменяйте зубную щетку перед тем, как выбросить ее.
8. Не погружайте зубную щетку в горячую воду.
9. Лица с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом могут использовать зубную щетку под контролем лиц, отвечающих за их общую безопасность, либо после инструктирования по вопросам использования и мерам безопасности.
10. Не позволяйте детям играть с прибором.
11. Чистка и обслуживание щётки детьми возможно только под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
12. Не нажимайте зубной щеткой на зубы и дёсны с чрезмерной силой. Избегайте удерживания щётки в одном положении на одном и том же месте, поскольку это может привести к появлению дискомфорта или травмам.

13. **ВНИМАНИЕ:** Осматривайте прибор на наличие повреждений перед каждым использованием. Не используйте прибор, если он повреждён.

14. **ВНИМАНИЕ:** Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, можете ли вы пользоваться зубной щеткой, если за последние два месяца вы перенесли стоматологическую операцию или проходите курс лечения зубов.

15. **ВНИМАНИЕ:** В течении первых дней использования щетки десны могут кровоточить. Если кровоточивость сохраняется более двух недель, обратитесь к стоматологу.

16. **ВНИМАНИЕ:** Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием зубной щетки, если у вас есть кардиостимулятор или другие электронные устройства, вживлённые в тело.

17. **ВНИМАНИЕ:** Во избежание возгорания не кладите на зарядное устройство никаких металлических предметов, таких как катушки или кольца.

18. **ВНИМАНИЕ:** Данный продукт предназначен только для чистки зубов, десен и языка. Не используйте прибор не по назначению.

19. **ВНИМАНИЕ:** Аккумулятор, установленный в приборе, содержит материалы, вредные для окружающей среды, выполните описанные ниже действия, чтобы снизить вредное воздействие:

- Перед утилизацией прибора необходимо извлечь аккумулятор из него.
- При извлечении аккумулятора прибор должен быть выключен.
- Аккумулятор необходимо безопасно утилизировать.

20. **ОПАСНО:** Не нагревайте зубную щетку и не бросайте ее в огонь, а также не храните, не заряжайте и не используйте в условиях высокой температуры, чтобы избежать перегрева, пожара или взрыва, поскольку она оснащена встроенной перезаряжаемой аккумуляторной батареей.

21. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Прекратите использовать насадку щетки с повреждённой или изогнутой щетиной. Заменяйте насадку щетки каждые 3 месяца или раньше при появлении признаков износа.

22. Зубная щетка предназначена только для личного пользования, не делитесь ею с другими лицами.

23. При первом использовании зубной щётки некоторые люди могут почувствовать раздражение зубов или онемение из-за высокоскоростной вибрации щетинок. Это нормальное явление. Если это состояние все еще возникает после двух недель непрерывного использования, прекратите использование зубной щётки и обратитесь к стоматологу.

24. USB-кабель зарядного устройства замене не подлежит, если он поврежден, зарядное устройство следует утилизировать.

25. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным центром или специалистом аналогичной квалификации во избежание возникновения опасных последствий.

26. Храните эту инструкцию для дальнейшего использования.

### **Хранение и транспортировка**


1. Храните прибор в сухом прохладном и безопасном месте, где отсутствует риск его повреждения или падения в воду.

2. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети.

3. Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

## **Описание прибора**

---

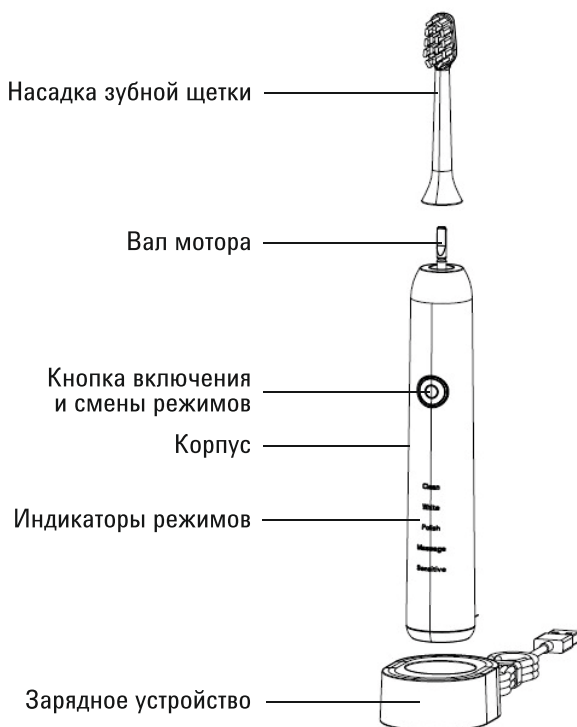

# Эксплуатация

---

## Зарядка ультразвуковой зубной щётки

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед зарядкой зубную щетку необходимо выключить.

**ВНИМАНИЕ:** Зубную щетку необходимо заряжать при температуре окружающей среды от 0 до 45°C. Слишком низкие или слишком высокие температуры могут привести к серьезным проблемам с безопасностью аккумулятора.

1. Положите зарядное устройство на ровную и твердую поверхность, затем вставьте USB-кабель в гнездо адаптера, после чего подключите адаптер к источнику питания.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед зарядкой убедитесь, что используемый адаптер должен соответствовать требованиям постоянного тока 5 В /  $\geq 0,5$  А.

2. Поставьте зубную щетку вертикально на зарядное устройство, убедитесь, что штифт на зарядном устройстве совпадает с нижней частью корпуса (см. рисунок 1). Во время зарядки кнопка включения мерцает красным цветом. Индикаторы режимов поочередно загораются белым, а кнопка постоянно горит синим, когда зубная щетка полностью заряжена.



Рисунок 1

## Правила использования ультразвуковой звуковой зубной щётки

1. Снимите защитную крышку вала двигателя, а затем вертикально наденьте насадку щетки вниз в вал двигателя, убедитесь, что насадка правильно установлена на место (см. рис.2 и рис.3).



Рисунок 2

Установите насадку на вал и убедитесь в правильности её положения



Рисунок 3

2. Промойте насадку водой, а затем нанесите на неё зубную пасту (см. рис. 4).



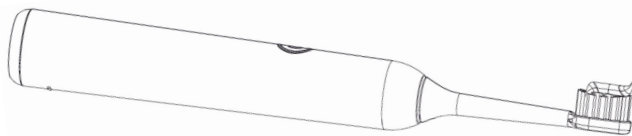


Рисунок 4

3. Поместите головку щётки в рот и начните чистку зубов. Держите щетину под углом  $45^\circ$  к зубам и дёснам.

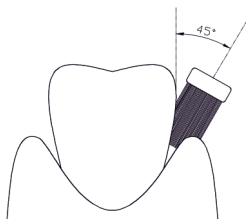

4. Нажмите кнопку включения / смены режимов, чтобы включить зубную щётку. Прибор включится в режиме очистки. Нажимайте кнопку в течение 5 секунд после включения, чтобы менять режимы работы циклически Очистка – Отбеливание – Полировка – Массаж – Мягкий – Выключить. Если нажать кнопку в любом режиме по прошествии 5 секунд после включения, то щётка выключится. Устройство запомнит последний использованный режим и включится в нём.

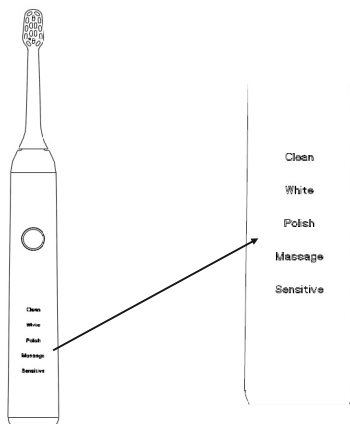

5. После выбора нужного режима щётка будет работать в течение 2 минут, затем автоматически выключится, и текущий режим работы будет сохранен. При следующем включении щётка начнёт работу именно в этом режиме.
6. Примерно каждые 30 секунд зубная щётка будет делать короткую паузу, напоминая вам о необходимости чистить другие участки рта, и автоматически выключится после непрерывной работы в течение 2 минут.
7. Плавно двигайте щётку вперед – назад, чтобы очистить все зубы.
8. После завершения чистки зубов промойте головку щетки проточной водой и высушите, корпус протрите полотенцем.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Если индикатор зарядки непрерывно мигает красным цветом во время работы, это означает, что аккумулятор разряжен, и вам необходимо произвести подзарядку.

## Чистка и уход

---

Перед чисткой отсоедините адаптер от источника питания и отсоедините USB-кабель от адаптера. Никогда не погружайте зарядное устройство в воду.

1. Промойте насадку под проточной водой.
2. Протрите зарядное устройство и корпус щётки мягкой тканью, затем хорошо высушите их. Никогда не используйте ядовитые чистящие средства.
3. Периодически очищайте зазор между корпусом и насадкой, а также нижнюю крышку зубной щетки, чтобы удалить грязь.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте химические, стальные, деревянные или абразивные чистящие средства для очистки внешней поверхности. Не мойте насадку или щётку в посудомоечной машине.

**ВНИМАНИЕ:** Зубную щетку необходимо заряжать при указанной температуре окружающей среды. Слишком низкие температуры (например, ниже 0°) или слишком высокие (например, выше 45°C) могут привести к серьезным проблемам с безопасностью аккумулятора.

## Утилизация

---

Вы можете помочь защитить окружающую среду!

Пожалуйста, помните о соблюдении местных правил: сдайте нерабочее электрооборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

## Технические характеристики

---

Зубная щетка предназначена для ухода за полостью рта. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	SONIC EX5
Кол-во режимов работы	5 (очистка, отбеливание, полировка, массаж, мягкий)
Таймер	2 минуты
Скорость	31 000 – 41 000 движений в минуту
Класс влагозащиты	IPX7
Аккумулятор	Литий-ионный
Емкость аккумулятора	800 мАч
Кол-во насадок в комплекте	2

# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара – 3 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_  
Подпись продавца  
(Без печати недействительна)

\_\_\_\_\_  
МП

1 Произведено в Китае компанией GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL  
APPLIANCES HOLDINGS CO, LTD

Адрес: SOUTH ZHENGHE ROAD, LELIU TOWN, SHUNDE DISTRICT,  
FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA

Сделано по заказу ООО «Компания РБТ»

Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8Б, оф. 303

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте [www.leran.pro](http://www.leran.pro)  
в разделе «Установка и ремонт».

**Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755**



