

Sentóre

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Портативный ирригатор
DENTIPRO WF3



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Меры предосторожности

Возможные опасности

1. Перед началом использования **ОБЯЗАТЕЛЬНО** полностью прочитайте данное руководство, чтобы избежать возможных травм из-за неправильной эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
3. Не разбирайте прибор и не заменяйте его компоненты, чтобы избежать повреждения прибора, получения травм или поражения электрическим током.
4. Не наполняйте резервуар водой горячее 40°C, чтобы избежать ожогов.
5. Если прибор упал в воду, сначала выньте вилку из розетки и только потом прибор можно достать из воды.
6. Если шнур питания или вилка повреждены, замените зарядное устройство перед тем как зарядить прибор.
7. Не нагревайте прибор огнём. Не заряжайте, не используйте и не утилизируйте его в местах с высокой температурой.

Внимание

1. Не нажимайте насадкой на десны или зубы с чрезмерной силой, чтобы избежать травмирования десен.
2. Не погружайте прибор в воду во избежание его поломки, возникновения пожара, поражения электрическим током или взрыва.
3. Не подключайте и не отключайте прибор из розетки мокрыми руками.
4. Перед включением прибора убедитесь, что параметры сети соответствует параметрам, указанным на шильдике прибора. Розетка должна быть заземлена.
5. Не используйте прибор с поврежденным зарядным устройством, шнуром или вилкой, а также после того, как прибор был повреждён каким-либо образом или упал в воду. Верните прибор в авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или регулировки.
6. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, электриком или аналогичным квалифицированным специалистом.
7. Убедитесь, что шнур питания не придавлен тяжёлыми предметами или зажат между ними, не перегибается и не свисает с острого края.
8. Убедитесь, что прибор и шнур питания не касаются горячих предметов. Держите их вдали от воздействия прямых солнечных лучей, открытого пламени и других источников нагрева.
9. Никогда не тяните за шнур питания, чтобы обесточить прибор. Удерживая вилку, потяните её из розетки.
10. Обесточьте прибор перед проведением обслуживания.
11. Не ставьте прибор в места с высокой температурой или влажностью, избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
12. Не заряжайте прибор в местах с высокой температурой или влажностью. Ванная комната или туалет не подходят для зарядки прибора.
13. Обесточьте прибор, если планируете им не пользоваться какое-то время. Это поможет снизить риск возгорания.

Обратите внимание

1. Если прибор нуждается в ремонте, сдайте его в сервисный центр производителя, поскольку в нем нет заменяемых или обслуживаемых деталей.
2. Пожалуйста, не используйте прибор без присоединенной насадки.
3. Не заливайте в резервуар средство для полоскания рта, которое может вызвать коррозию прибора.
4. Данное устройство может использоваться детьми и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями только после проведения инструктажа по безопасному использованию электроприбора, дающего им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Использование должно проходить под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
5. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, можете ли вы пользоваться прибором, если за последние два месяца вы перенесли хирургическую операцию в стоматологии или проходите курс стоматологического лечения.
7. Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

Хранение и транспортировка


1. Храните прибор в сухом прохладном и безопасном месте, где отсутствует риск его повреждения или падения в воду.
2. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети.
3. Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.

Описание прибора




Эксплуатация

1. Перед началом работы убедитесь, что ваши руки сухие, затем подключите прибор к источнику питания.


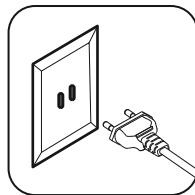


2. Вставьте корпус в зарядное устройство, индикатор зарядки мигнет и будет продолжать мигать во время зарядки. Когда ирригатор будет полностью заряжен, индикатор зарядки начнёт гореть постоянно. Для полной зарядки требуется около 24 ч.

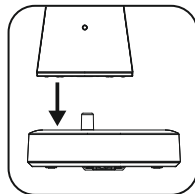

Ирригатор нужно зарядить, если индикатор зарядки мигает перед началом или после использования.



3. Отсоедините прибор от зарядного устройства, затем вставьте насадку в корпус. Нажмите кнопку отсоединения насадки и потяните её из корпуса для извлечения.

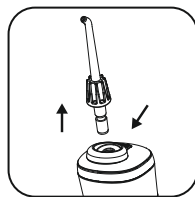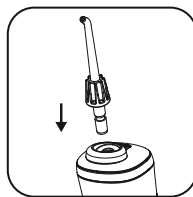

4. Заполните резервуар одним из двух способов:

a. Откройте крышку на резервуаре, удерживая устройство горизонтально. Залейте воду и закройте крышку.

b. Извлеките резервуар и залейте воду через открывшуюся горловину.

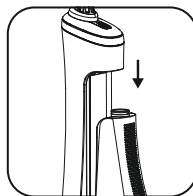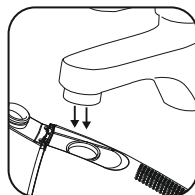


5. Выберите нужный режим кнопкой «Mode». Режимы сменяются циклично средний-Мягкий-Пульсирующий-Средний-... Переключаться между режимами можно во время работы.

a. Средний: подходит для ежедневного использования.

b. Мягкий: подходит для чувствительных зубов. Используйте этот режим первую неделю использования прибора. После адаптации вы можете использовать другие режимы.



c. Пульсирующий: подходит для массажа дёсен, улучшения кровообращения и укрепления зубов.

6. Удерживайте ирригатор вертикально, а затем вставьте сопло в рот и направьте на десны или зубы, в то же время слегка приоткройте рот, чтобы вода свободно вытекала.

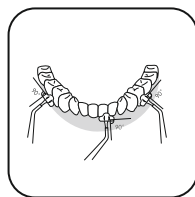

7. Во время эксплуатации обратите внимание на следующее.

- a. Струя должна быть направлена перпендикулярно деснам или зубам.
- b. Медленно перемещайте водяную нить вдоль зубов и чистите их по порядку. Не распыляйте воду непосредственно на пародонтальный карман.

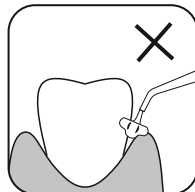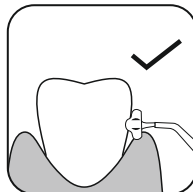




8. После завершения чистки зубов нажмите на кнопку выключения.

Прибор автоматически выключится после работы в течение 2 минут.

Нажмите на кнопку включения еще раз, если необходимо продолжить чистку.

9. Для слива оставшейся воды выполните следующие действия:

- a. Откройте крышку и слейте воду через отверстие.
- b. Включите прибор для автоматического удаления остатков воды.
- c. Выключите прибор и закройте крышку резервуара.
- d. Протрите прибор сухой салфеткой.

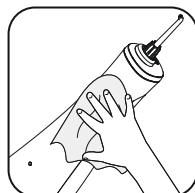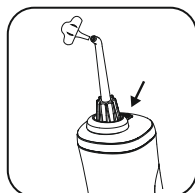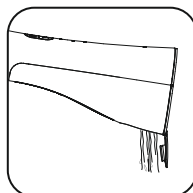

Чистка и обслуживание

Очищайте ирригатор чистой водой или нейтральным моющим средством, но никогда не используйте агрессивные или абразивные моющие средства, так как это может повредить устройство. Не используйте воду горячее 50°C.

1. Чистка корпуса

- a. Протрите корпус сухой или влажной салфеткой
- b. Не погружайте прибор в воду для очистки

2. Чистка резервуара

- a. Протрите резервуар сухой или влажной салфеткой. Извлеките его и слейте всю воду.
- b. Тщательно просушите резервуар перед хранением устройства

3. Чистка насадки

- a. Протрите насадку сухой или влажной салфеткой. Извлеките её и слейте всю воду.
- b. Не сгибайте, не растягивайте и не деформируйте насадку.
- c. Стоматологи рекомендуют заменять насадку каждые 6 месяцев.

4. Чистка зарядного устройства

Протирайте металлическую часть вилки сухой салфеткой каждые 6 месяцев, чтобы избежать накопления пыли и ухудшения контакта.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная проблема	Устранение
Ирригатор не работает	Прибор используется впервые или не был использован последние 3 месяца.	Зарядите прибор в течение 24 часов.
Низкое давление воды	Засорено или деформировано сопло	Замените насадку
Прибор работает только короткое время после полной зарядки	Фильтр засорён	Очистите фильтр
	Вышел срок использования аккумулятора	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Ирригатор не заряжается должным образом	Зарядите устройство в течение суток или более
Индикатор зарядки не горит во время зарядки	Вилка не до конца вставлена в розетку	Вставьте вилку в розетку должным образом
	Отсутствует контакт	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Утилизация


Ирригатор оснащён перезаряжаемой батареей, пригодной для вторичной переработки. Когда срок службы устройства истечет, извлеките батарею, а затем утилизируйте в соответствии с местными правилами утилизации отходов. Пожалуйста, проконсультируйтесь с местным органом по утилизации отходов, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Извлечение аккумулятора

Не разбирайте ирригатор, если только его не нужно выбросить, иначе он будет поврежден. Пожалуйста, отключите прибор от сети, прежде чем извлекать аккумулятор.


1. Прежде чем вынимать аккумулятор, убедитесь, что он разряжен. Чтобы разрядить аккумулятор, включите устройство, и заставляйте его работать до тех пор, пока оно не перестанет работать. Повторите операцию несколько раз, пока не разрядится аккумулятор.

2. Снимите резервуар для воды, а затем открутите два винта на нижней крышке с помощью крестовой отвертки.

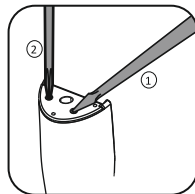


3. Открутите два винта на верхней крышке, затем снимите верхнюю крышку и извлеките сердечник устройства.

4. Открутите винты на кронштейне сердечника блока.

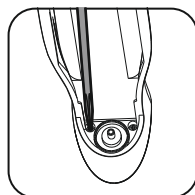


5. Срежьте ножницами соединительный провод аккумулятора, затем извлеките аккумулятор.

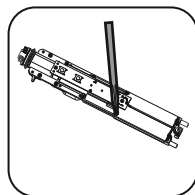

6. Утилизируйте аккумулятор надлежащим образом.

Примечание! Во избежание короткого замыкания батареи не пытайтесь заряжать её после извлечения.

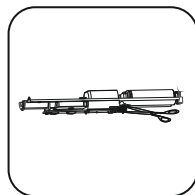

Экологически чистая утилизация

Вы можете помочь защитить окружающую среду!
Пожалуйста, помните о соблюдении местных правил: сдайте нерабочее электрооборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

Технические характеристики

Ирригатор предназначен для ухода за полостью рта. Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель	DENTIPRO WF3
Кол-во режимов работы	3 (средний, мягкий, пульсирующий)
Объем резервуара для воды	170 мл
Давление	40–90 PSI
Класс влагозащиты	IPX7
Аккумулятор	Литий-ионный
Емкость аккумулятора	1400 мАч
Кол-во насадок в комплекте	2

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.
2. Срок службы товара – 3 года.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в Китае компанией GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL
APPLIANCES HOLDINGS CO, LTD

Адрес: SOUTH ZHENGHE ROAD, LELIU TOWN, SHUNDE DISTRICT,
FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA

Сделано по заказу ООО «Компания РБТ»

Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8Б, оф. 303

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro
в разделе «Установка и ремонт».

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

