

LERAN

Smart Body Fat Scale

УМНЫЕ ВЕСЫ LERAN IDS FITNESS LINE 5

Руководство по эксплуатации


Электрический прибор бытового назначения. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

1. УСТАНОВКА И ЗАРЯДКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Устройство питается от батарей типа AAA. Пожалуйста установите их, как показано на рисунке ниже

При первом использовании откройте крышку батарейного отсека на задней панели весов и извлеките изолирующую полосу.

Для замены батарей откройте крышку батарейного отсека, извлеките старые, а затем установите новые элементы питания. Соблюдайте полярность.

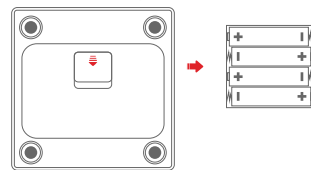

Примечание: после установки батарей, пожалуйста, закройте крышку батарейного отсека. Используйте соответствующие элементы питания. Извлеките батареи, если весы не используются в течение

2. Если весы оснащены перезаряжаемым аккумулятором:
А) Весы должны быть полностью заряжены при первом использовании или после длительного хранения. Символ батареи мигает во время зарядки и постоянно отображается после завершения зарядки. На полный заряд уходит около 2 часов.
Б) Пожалуйста, используйте зарядное устройство 5V с током равным или меньшим 2А.
НЕ используйте зарядное устройство с напряжением более 5 В.
В) Рекомендуется заряжать аккумулятор каждые 3 месяца, если весы не используются в течение длительного времени.

Примечание: Символ батареи отображается на жидкокристаллическом дисплее во время зарядки. В целях вашей безопасности, пожалуйста, не пользуйтесь весами во время зарядки. Начинать взвешивание только после завершения зарядки и отключения зарядного устройства.

2. ЗАГРУЗИТЕ И НАСТРОЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ


Найдите "MovingLife" в "App Store" или "Google Play", чтобы загрузить приложение или отсканируйте QR-код ниже.



Примечание: Приложение постоянно обновляется, поэтому оно может отличаться от показанного в руководстве. Для получения окончательной и точной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с приложением.

2. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Откройте приложение "MovingLife", подключите устройство к приложению и создайте свой личный профиль. (Перед подключением, пожалуйста, убедитесь, что Bluetooth включен и горит ЖК-дисплей шкалы)
Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что указанная вами личная информация верна, чтобы получить точные измерения.

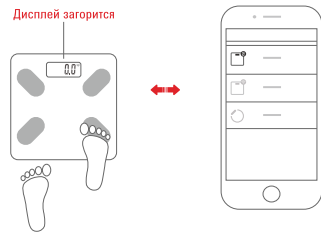

Аккуратно встаньте на весы, чтобы их включить

Установите соединение весов с приложением

4. ВЗВЕШИВАНИЕ

Поставьте весы на твердый и ровный пол. Встаньте на весы босиком. Дисплей отображает измеряемую массу, цифры мерцают, а затем стабилизируются. Информация передается в приложение. Весы отключаются через несколько секунд. Приложение покажет и сохранит все индексные и исторические записи.



Поставьте весы на твердый и ровный пол.


Встаньте на весы босиком, обе ноги должны стоять на электродах

Проверьте результаты измерений в приложении

Примечание: Чтобы правильно измерить содержание жира в организме, пожалуйста, держите босые ноги на электродах весов.

5. ИЗМЕРЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Весы могут хранить измерения нескольких пользователей. Конечные измерения для пользователя зависят от устройства.

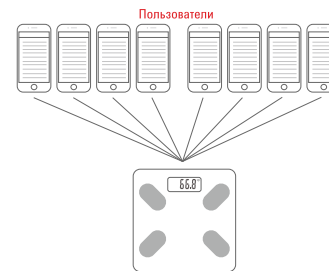

6. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ. КАЛИБРОВКА



Калибровка. Возникла ошибка, проведите повторное измерение, чтобы увидеть правильный результат.



Превышена максимально допустимая масса. Пожалуйста, сойдите с весов, чтобы избежать повреждений.



Низкий заряд батареи. Батарея разряжается, пожалуйста, замените её на новую.

7. ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

Это устройство может автоматически определять и отображать температуру окружающей среды при запуске.

Он будет постоянно обновлять последнюю температуру окружающей среды до выключения питания.

Если вы меняете условия эксплуатации изделия, рекомендуется проверить показания температуры через 30 минут, чтобы убедиться в их точности.

(Некоторые устройства не имеют датчика температуры, пожалуйста, обратитесь к фактическому описанию.)

8. НАСТРОЙКА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ И ПЕРЕЗАПУСК ВЕСОВ

Настройте единицы измерения в приложении. Если такой возможности нет, используйте кнопку сброса на обратной стороне весов.

Примечание: Устройства с аккумуляторной батареей имеют кнопку сброса. Воспользуйтесь ей, если весы работают неправильно.



Полезные советы

Весы можно использовать для взвешивания и расчет процентного содержания жира в организме и гидратации после того, как вы зададите пол/параметры роста/возраста и т.д. Эти измерения являются лишь ориентировочными для определения содержания жира в организме.

Использование устройства противопоказано:

- Беременным
- Людям, имеющим симптомы отёка
- Пациентам на диализе
- Людям, использующим кардиостимуляторы или другие имплантированные медицинские устройства.

Эти весы могут передавать данные о вашем весе на ваш смартфон по Bluetooth, а также составлять график результатов вашего взвешивания, по которому вы в любое время сможете отслеживать динамику.

Загрузите приложение на свой телефон, чтобы использовать умные весы, сделать первый шаг по контролю веса.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

1. Для обеспечения точности данных рекомендуется проводить каждое измерение в одно и то же время суток. Не используйте в условиях сильного электромагнитного поля и на неустойчивой поверхности

2. Встаньте на электроды весов босиком. Не наступайте на край весов и стойте неподвижно во время замеров.

3. Не используйте весы в помещениях с повышенной температурой и влажностью. Диапазон рабочих температур от 5°C до 35°C.

4. При разрядке батарей своевременно извлеките их из весов, чтобы избежать утечки;

5. Если включить весы не удалось, проверьте, установлены ли элементы питания. Установите или замените батарейки на идентичные AAA.

6. Для весов со встроенной перезаряжаемой батареей, нажмите кнопку сброса чем-нибудь острым.

7. НЕ ударяйте, не трясите и не роняйте весы.

8. Протрите весы влажной салфеткой и избегайте попадания воды внутрь весов.

НЕ используйте химические/абразивные чистящие средства.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Если приложение не может получить результаты взвешивания от весов.

- × Пожалуйста, подтвердите подключение в интерфейсе приложения, чтобы узнать статус подключения.
- × Убедитесь, что Bluetooth включен в вашем устройстве и весы находятся в радиусе действия сигнала.
- × Проверьте, не разряжен ли аккумулятор.
- × Перезапустите приложение.
- × Выключите и снова включите Bluetooth, затем снова установите Bluetooth-соединение между весами и смартфоном.

Если смартфону не удаётся подключиться к весам.

- × Пожалуйста, убедитесь, что подключение к весам настроено только на одном устройстве.
- × Пожалуйста, убедитесь, что ваше устройство оснащено Bluetooth 4.0 или выше.

ЖК-дисплей не реагирует

- × Если весы питаются от батареек типа AAA, пожалуйста, сначала проверьте батарейки и при необходимости замените их.
- × Если весы оснащены встроенной перезаряжаемой батареей, пожалуйста, используйте USB-кабель для их подзарядки.
- × Ремонт может выполнять специалист сертифицированного сервисного центра.

Внешний вид Вашего устройства может отличаться. Изображения приведены только для ознакомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство предназначено для бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Модель: LERAN IDS FITNESS LINE 5

Максимальный вес: 180 кг

Шкала: 100 г

Питание: 3x1.5 V AAA

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания. Срок службы: 2 года со дня передачи товара потребителю, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Специальные условия реализации не установлены.

При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование, отключить от электросети и передать в ближайший авторизованный сервисный центр.

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт». Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечению срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Утилизация изделия



Отслужившее изделие нужно сделать непригодным для использования. Для этого отсоедините его от электросети и обрежьте кабель, так как он может представлять опасность для играющих детей. Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Утилизация упаковочных материалов



Упаковочные материалы подлежат вторичной переработке и содержат соответствующий знак. Тем не менее, отдельные части упаковки должны быть утилизированы согласно правилам местной администрации, касающимся ликвидации отходов.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара потребителю.

2. Срок службы товара — 2 года.

3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неавторизованного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.

4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п. 3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца (Без печати действительна) _____ МП

Произведено в КНР компанией ZHONGSHAN CAMRY ELECTRONIC CO., LTD
Адрес: BASHAWAN INDUSTRIAL PARK QIWAN ROAD (N), ZHONGSHAN, GUANGDONG, CHINA

Сделано по заказу ООО «Компания РБТ»
Адрес: Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 8Б, оф. 303

Информацию об авторизованных сервисных центрах вы можете узнать на web-сайте www.leran.pro в разделе «Установка и ремонт»

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-755-3-755

ERC